

KANMED^o BABYWARMER

KANMED BABY WARMING SYSTÉM



Je to práve mäkký vyhriaty vodný matrac, ktorý robí Kanmed Baby Warming systém unikátnym



voda so správnou teplotou
poskytuje optimálne ohrievanie

37°C



Kanmed Baby Warming Filozofia



voda so správnou teplotou
poskytuje optimálne ohrevanie

Len tá najlepšia starostlivosť je dostatočne dobrá pre novorodencov a predčasne narodené deti

Predčasne narodené dieťa spať pokojne a bezpečne na mäkkom vodnom matraci s teplotou 37°C. Vďaka vodnému matracu sa novorodenec cíti, akoby bol vedľa matkinej teplej pokožky. Len mäkký vyhriaty vodný matrac môže nahradiť hrejivú úľahu moderného inkubátora.

Kanmed BabyWarmer sa používa v nemocniciach po celom svete ako bezpečná a nákladovo efektívna alternatíva inkubátora. Systém je dobre zdokumentovaný

publikovanými lekáorskými štúdiami* a ak sa používa. Rodičia sa môžu vyhovieť a na starostlivosť o svojho novorodenca alebo predčasne narodené dieťa, dojčenie sa môže začať rýchlejšie a dieťa môže skôr opustiť nemocnicu.

Hneď ako je dieťa stabilné a pokožka dozrela, môže byť premiestnené do Kanmed BabyWarmer. Tým sa potrebný počet inkubátorov zredukuje, čo šetrí peniaze.

* zoznam literatúry nájdete na poslednej strane

Váš Kanmed BabyWarmer

Kanmed Baby Warmer je veľmi bezpečný a jednoduchý na používanie. Všetky komponenty sú najvyššej kvality, aby zabezpečili dlhú a bezproblémovú životnosť. Správne používanie zaisťuje optimálne ohrevanie vášho dieťaťa.

VÝHODY VODNÝCH MATRACOV KANMED

Teplá voda obsahuje veľa energie. Preto dieťa nemôže vodu ochladzovať, takže teplota pokožky dieťaťa sa nemení na teplotu vody - vodný matrac je tak najúčinnejší a najbezpečnejší spôsob, ako udržať teplotu dieťaťa na 37°C. Vodný matrac Kanmed vytvára s dieťaťom tepelnú rovnováhu, takže dieťa môže väčšinu svojej



energie venovať tomu, čo je dôležité - optimálnemu rastu, namiesto toho, aby spotrebovávalo energiu na udržanie tepla. Ďalšou výhodou je, že v prípade výpadku prúdu vodný matrac udrží dieťa bezpečne zohrievať až dve hodiny, pretože voda sa ochladzuje pomaly.




RIADIACA JEDNOTKA A MATRACE

Za CE certifikovaným systémom Kanmed BabyWarmer je 30 rokov skúseností. BabyWarmer má 2 typy vyhrievacích matracov, využívajúcich rovnakú vyhrievaciu podložku s riadiacou jednotkou.

- 1 vodný matrac
- 2 gélový matrac / integrovaný gélový matrac

Ú INNOS VYHRIEVANIA

Na odhad účinnosti vyhrievania sa použila plastová fľaša naplnená 500 ml vody, položená na oba typy matraca, keď boli v ustálenom stave pri teplote 37°C. Fľaša bola zakrytá dvojitou vrstvou bavlnenej prikrývky. Nárast teploty vody bol postupne zaznamenávaný. Ako je znázornené nižšie, vodný matrac má najvyšší prenos energie a je preto najúčinnejším vyhrievacím matracom.

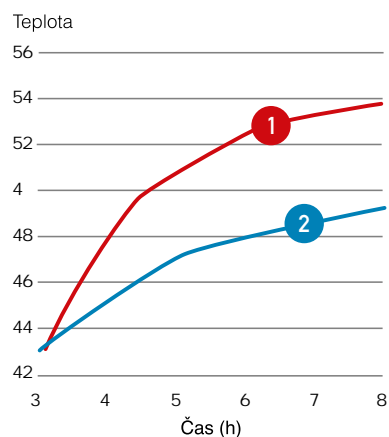

Vodný matrac


1

Stabilné nedonosené deti

Gélový matrac

2

Donosené deti

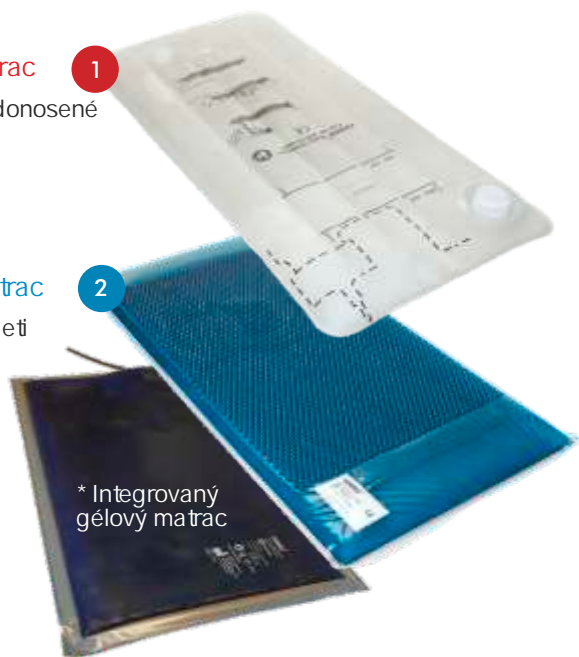

* Integrovaný gélový matrac

JEDNODNODUCHÉ POUŽITIE

Predčasne narodené dieťa a môžete začať ohrievať na Kanmed BabyWarmer od okamihu, keď je stabilné, ale stále vyžaduje minimálnu klinickú intervenciu, ako napríklad jemnú podporu dýchania.

Na kontrolu teploty novorodenca je možné použiť štandardnú teplotnú sondu.

- zvolte matrac, vyhovujúci potrebám dieťaťa a
- do vrečka pod matracom vložte vyhrievaciu podložku (alebo použite integrovaný gélový matrac) a celé to vložte do hniezda BabyNest
- zapnite riadiacu jednotku a nastavte teplotu
- keď je indikátor na riadiacej jednotke zelený, teplota matraca je optimálna

BENEFITY

- podporuje optimálny rast
- jednoduché použitie a čistenie
- výrazné zníženie nákladov v porovnaní s inkubátorom

KANMED^o BABYWARMER

„Len teplý mäkký vodný matrac môže nahradiť výhrevnú úlnos moderného inkubátora“.

PRETO BY STE MALI POUŽÍVA
KANMED BABYWARMER



Za posledných 30 rokov bolo viac ako dva milióny malých a predčasne narodených detí úlnne zahrievaných na vodnom matraci Kanmed.

- Kanmed BabyWarmer je navrhnutý tak, aby udržiaval predčasne narodené, takmer donosené alebo novorodené deti dokonale vyhriate
- v dôsledku toho je dokázané, že deti opúšťajú inkubátor skôr, lepšie spia a optimálne rastú
- mäkký teplý vodný matrac Kanmed a Kanmed hniezda BabyNest poskytujú podobné zahrievanie a pohodlie ako pri skin-to-skin kľokankovaní
- používanie Kanmed BabyWarmer by mohlo pomôcť k skoršiemu prepusteniu z nemocnice a tým zníženiu nákladov na liečbu.
- Kanmed BabyWarmer sa ľahko a bezpečne používa a je veľmi obľúbený u detí, rodičov a nemocničného personálu
- máte na výber z rôznych veľkostí vodných matracov ako aj hniezd BabyNest. Navštívte prosím www.kanmed.se

REFERENCIE

PH Gray et al, University of Queensland, Australia. Cot nursing a heated water filled mattress and incubator care. (2004). Acta Paediatrica 93 308-310 2004-03-18. Prevention of Neonatal Cold Injury in Preterm Infants. Ragnar Tunell. Ass.Professor emeritus Stockholm.

The Cochrane Collaboration. PH Peter Gray and Vicki Flenady. Cot nursing versus incubator care for preterm infants.

Acta Paediatric 82 930-3. Ihsan Sarman, Ragnar Tunell, Lena Västberg, Ulla Carlquist, Gülay Can and Derya Toprak. Mothers' perception of their preterm infants treated in an incubator or on a heated water filled mattress.

Na celom svete sa používa viac ako 15 000 systémov, ktoré zahrieli už viac ako 2 milióny detí

Distribútor pre SR **DARTIN**

DARTIN Slovensko spol. s r. o.

. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov
tel. 051 7734403
e-mail info@dartin.sk



Viac informácií nájdete
na www.kanmed.se

KANMED^o
a MedCare Visions® company

Kanmed AB

Hammarbacken 6A, SE-191 49 Sollentuna, Sweden
Telephone +46 8 564 80 630. E-mail info@kanmed.se

www.kanmed.se